

Instruktionsbok



För Professionella V3 Serier
SVENSKA

© Augusti / 2020 - © 2022

Index	sida 2
Introduction	sida 3
. Teknisk information	sida 4
. Hur man använder spännband	sida 5-6
. Det professionella V2 keyboardet	sida 7-8
. De professionella V2 serierna	sida 9
. Snabbstart och spänningsjustering	sida 10-11
. Installera språk (engelska /japanska/ spanska)	sida 12
Automatiska funktioner på V2 professionell	
. Supersvep	sida 13-14
. Konvergenssvep	sida 15-16
25 Grupper: val under meny	sida 17
. Gruppval och kommandon	sida 17
. Läge: kör / driv	sida 18-19
. Läge: pulseringsdriv	sida 20-22
. Läge: svep	sida 23
. Läge: pulssvep	sida 24-26
. Läge: program	sida 27
. Lista på 20 förinställda grupper	sida 28-31
. Funktion: (RF) radiofrekvens	sida 32-33
. Funktion (CW) högfrekvens elektromagnetisk våg	sida 34
. Rife digitalt professionella V2 CPU uppgradering	sida 35
. Funktion: fabriksåterställning	sida 36
. Frågor och svar	sida 37
	sida 38-41
Rekommendationer för behandling	sida 42-44
. Varningar, Herxheimerreaktion, förslag	sida 45-47
. Teknisk data, spec blad	sida 48-49
. Introduktion till ETDFL, ansvarsfriskrivning	sida 50-51
. Kontakt, försäljning, service på engleska	sida 52

Introduktion:

Grattis till ditt köp av den professionella V2 seriens elektoterapiapparat (ETD). Följande guide innefattar en introduktion till elektroterapi och rekommendationer för användningen av din apparat samt den officiella ETDFL-frekvenslistan, reviderad för din apparat.

En introduktion på parasiter och förklaring på en leverrengörning som vi starkt rekommenderar.

Vi önskar dig varje framgång med din terapeutiska behandling och en positiv upplevelse i användandet av din nya apparat!

WARNING: Denna maskinen är en elektroterapiapparat med mycket hög voltagepotential. Läs denna broschyren noggrant och använd din apparat exakt som hänvisat.

Grunder:

Vad är elektroterapibehandlingen med ETD mot?

- Använd elektroterapi för att bekämpa vissa virus, bakterier, parasiter, etc.

Elektroterapi fungerar på ett liknande sätt som homeopati; användande de naturliga principerna för att läka kroppen. Allting runt oss har redan en elektriskt laddning, en frekvens - som vi jämt och ständigt är utsatta för. Om du har ett speciellt virus, livnär de sig i ett givet frekvensiskt fält.

Låt oss anta, för enkelhetens skull, att de lever enbart i en enda elektriskt frekvens.

När du tillförser din kropp med samma frekvens, genererad via en ETD (med mycket detaljerade vågor) överstimuleras viruset och dör.

- Använd elektro-terapi för att återställa vitalitet och hälsa: Programmet producerar en harmonikresonans i kroppen.

Varje symptom medger en elektrisk dissonans i organismen. Med de ytterligare generella programmen såsom ryggsmärta, avgiftning, program för lungor, lever, etc., kommer dissonansen i kroppen att bli transformerad till harmonikresonans. Sådana program är speciellt användbara för meridianbehandling, kopplat till 4 spännbandskombinationer.

- Använd elektroterapi för avgiftning. Avgifta tungmetaller, kemikalier och andra oönskade gifter i organen.

- Använd elektroterapi i behandlingen av alla sjukdomstillstånd.

Teknisk beskrivning

Frekvensläge

0:01 kHz - 999.99 kHz (1 MHz)

25 behandlingsprogram

- 20 unika behandlingsgrupper
- + 5 (blank) extra användare, programbara grupper
- Varje grupp består av 10 behandlingsfrekvenser.
- Förinställningar kan bli återställda genom fabriksinställning.
- Alla 25 grupper kan bli omprogrammerade

Frekvensvåg och sidoband

30 MHz Mikroprocessor radiofrekvens/högfrekvens elektromagnetisk våg med fyrkantig vågform; labbtestad fyrkantig våg. SINEvåg på Beamstråle

Högfrekvens elektromagnetisk våg och radiofrekvens och byte under drift

Laboratorietested harmonikvågform periodvis på 100% frekvenser. Rifemaskin model 110 & 281 högfrekvens elektromagnetisk våg/rf- kompitabel.

Spänningsinput

19v DC / 4500 mA (110 V / 250 V SMPS) Internationell spänning accepterad, extern DC ändringsläge batteritillförelseadapter.

Korrekt spänningsoutput , variabel (användande Oscilloscope)

12.5v, 14.5v, 17v DC med 100% positiv offset

50% Spänningoutput , variabel (användande Multimeter)

Variabel 6v, 7v, 8.5v DC med 100% positiv offset (Multimetern kan ej känna igen spänningsmotstånd med en frekvensvåg)

CPU Operativtemperatur (säker) *

26° - 33° Celcius

78° - 90° Fahreneit (normal opertivtemperatur)

DUAL RCA Outpututtag

2 RCA uttag, 1 set av handspännband, 1 set av fotspännband.


Hur man använder spännbanden




Bästa stället för långa stunder av behandling, såsom nattetid, är under fotsulorna. På ett sätt att knappen av rostfritt stål vidrör undersidorna av fötterna. Fotsulorna har väldigt tjock hud och tolererar långa perioder av elektroterapi.

Vi rekommenderar i användandet av spännbanden att de blå konduktivhöljet är i kontakt med undersidan av foten och att den rostfria stålknappen alltid måste vidröra fotsulan.

Korrekta sättet att använda spännbanden

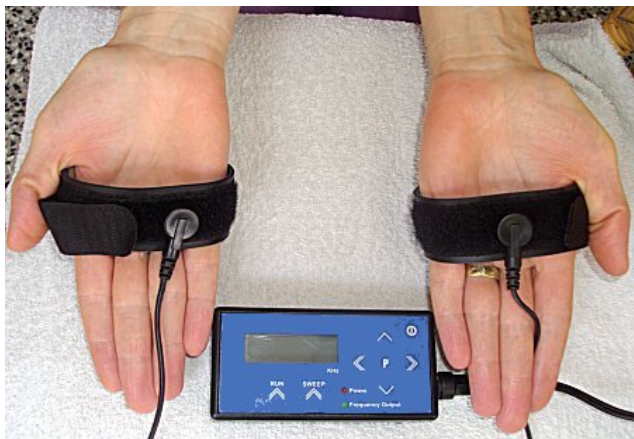

Omlokalisera spännbanden till handflatorna

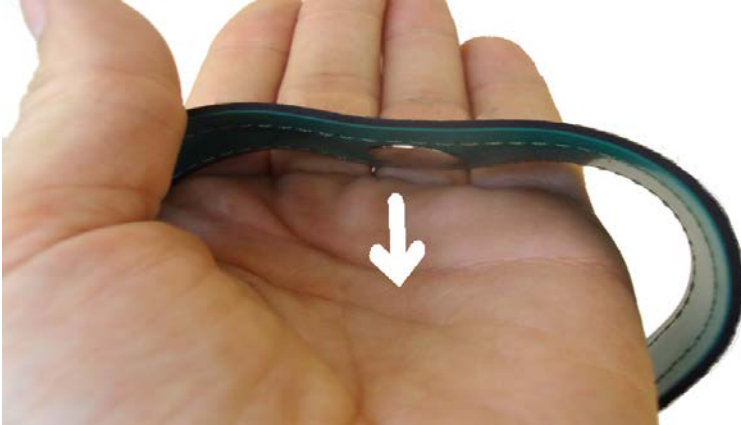

Silverknappen skall vara innåt mot handflatorna



Eller ställ in spännbanden så de omsluter fotsulorna (rekommenderat)

Det professionella V2:keyboardet



Fabriks-
-återställning



Påknapp



Enter

or



Enter: Välj, för alla menypunkter



Escape: Återgå till föregående meny



Sänk och höj: Förflyttning av upp och ned i menyn



Högfrekvens elektromagnetisk våg, byte under drift (se sida 35)



Radiovågsfrekvens (se sida 34)


0 to 9

Knapp 0 - 9: Knappar för inknappning av frekvenskoder, under tiden "Program" körs.



Snabbstart: PRO V2 serier

- ▶ Koppla kraftadaptern till kraftuttaget
- ▶ Koppla kraftledningen till maskinen
- ▶ PÅ-ljus indikerar välfungerande kontakt
- ▶ Du kan koppla ett av spännbandsleden till #1
- ▶ Du kan koppla det andra ledet till #2

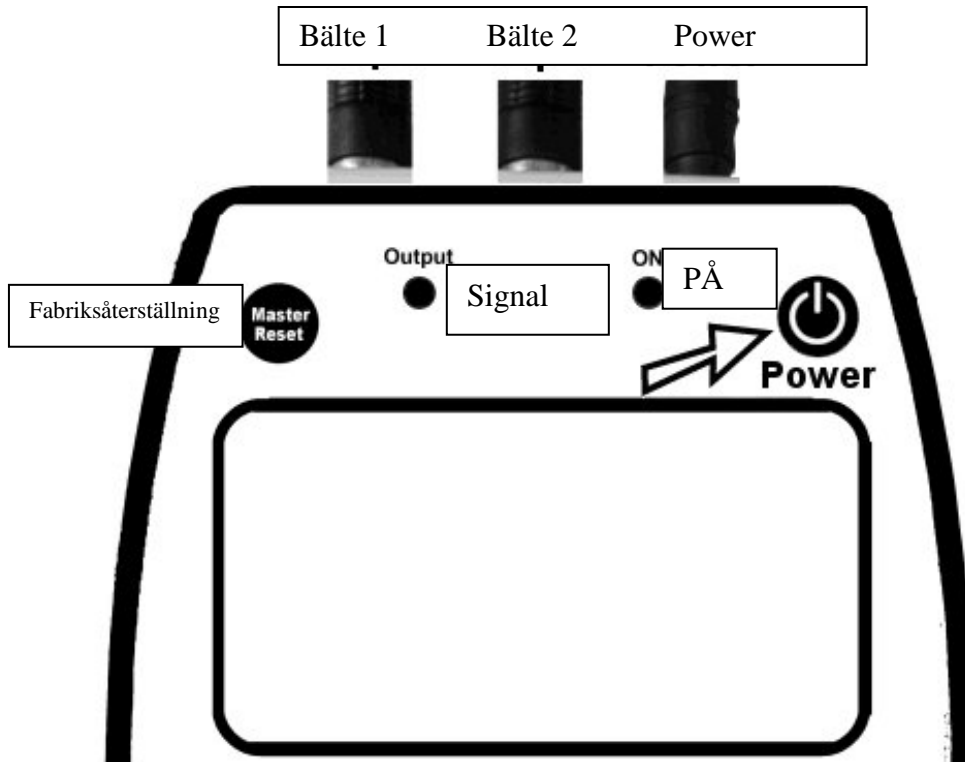

- ▶ Tryck på powerknappen för att starta maskinen
- ▶ LCDdisplayen kommer startas
- ▶ Maskintyp och info kommer att visas

Snabbstart:


► Börja med att starta din nya maskin genom att trycka på Fabriksinställning, vänster hörn högst upp. Detta kommer möjliggöra omedelbar tillgång till spänning (sensitivitet) inställningar- och språkmeny. Alla förinställningar på grupp 21 - 25 kommer bli omställda till noll.

Fabriksinställning



Spänning:

► Första menyn är Spänning. Spänningen är förinställt på 17v. Detta är utgångsläget för Rife Digital och **bör inte** ändras. Denna spänningsnivå tillgodoser den mest effektiva behandlingsnivån.

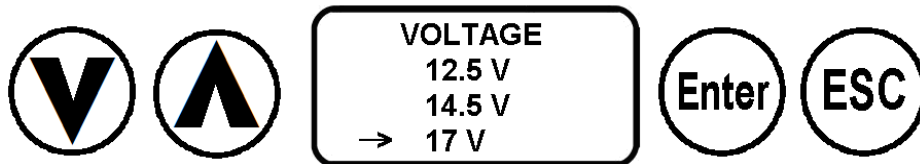


Reducera spänning enbart för:

- Behandling av små barn
- Superkänslighet mot frekvenssignalen
- Känslighet som orsakar rodnad eller hudutslag
- Användandet av en Rifehelningsmatta i direktkontakt med huden.

Många avancerade vertyg som Beamradiation kommer enbart fungera på 17v, förminskad kraft tillförande Beamraditionen kommer orsaka Beamstrålningstillbehöret att fungera oeffektivt.

Alla allvarliga sjukdomsfrekvensprogram är designade att verka på 17v spänning, så för effektiva behandlingar, lämna gärna spänningen på 17v

Knappsattser som fungerar i voltagemenyn

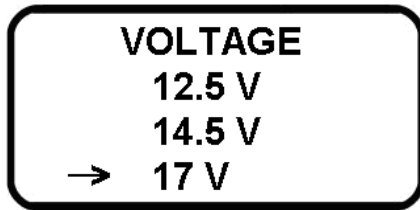

Språk:

► Den professionella V2 maskinen har 3 språk inbyggda i maskinen: engelska (fabriksversionen), japanska och spanska.

Språkmeny:

Språk
ENGELSKA
Japanska
Spanska



Knappar som fungerar i språkmenyn



Engelska är standardspråket, hur som helst, väljer du att byta språk kommer hela maskinen få ett nytt språk, ett språk som du möjligen inte förstår, så kom ihåg att trycka "Fabriksåterställning" om du åter behöver engelska på maskinen.

Meny: Supersvep / introduktion

Supersvep är en funktion på maskinen som tillåter användaren att svepa varje frekvens upp till 1 million Hz eller (999.99kHz)


När varje frekvens är tillförd användaren, kan användaren känna av en annorlunda typ av elektroterapihelande, som kan komma att tillföra assistans i situationer då specifika frekvenser inte är resultatkvicka i tillförandet.

Supersvep är enkel att hitta på huvudmenyn, och med ett simpelt tryck på "Enter" påbörjar Supersvep "Playback". Du kan pausa vart som helst i cykeln genom att trycka "Enter" igen. Ytterligare ett enter-tryck återupptar cykeln.


Det är rekommenderat att använda specifika frekvenser i minst 10 minuter per frekvens, på den specifika "sjukdomsbehandlingen" (finnes i ETDFlistan)

Hur som helst är det ingen skada att köra alla frekvenser, då och då, i SuperSvepläget.

Läge: Supersvep / tillgängliga knappar

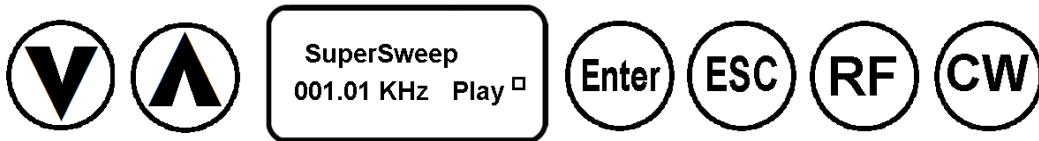

► Enter: Play: När "Play" syns på enhetsskärmen är dataproduktionen igång och (ON)-ljuset är tätt. Nästan alla andra knappar är låsta i playläget, men du kan ändå koppla spännbanden och påbörja din behandling i playläget. Frekvensen visad på skärmen är den frekvens spännbanden mottager.

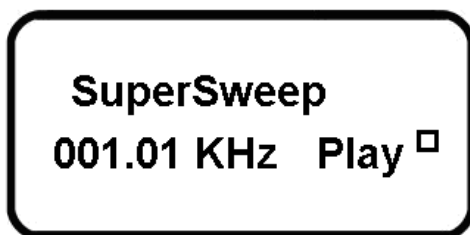

► Pause: Tryck "Enter" igen för att pausa programmet som körs. Detta knapptryck möjliggör alla tidigare låsta knappfunktioner.

► ESC: Tryck på ESCknappen, från "Pause", för att återgå till föregående meny.

► De högfrekvens elektromagnetiska våglägena och radiofrekvenslägena är ändringsbara i playläge. (Byte under drift) Se sida 34 - 35 för information om högfrekvens elektromagnetisk våg och radiofrekvens.

Meny: Konvergenssvep

Konvergenssvep är en ny funktion på apparaten som tillåter användaren uppleva dubbel frekvensoutput (2 frekvenser simultant) användande en avancerad version av Supersvepfunktionen.


Frekvensoutput från 000.01 till 999.99,
frekvensoutput från 999.99 till 000.01, samtidigt.

När varje frekvens är tillförd användaren, kan användaren känna av en annorlunda typ av elektroterapihelande, som kan komma att tillföra assistans i situationer då specifika frekvenser inte är resultatkvicka i tillförandet.


Konvergenssvep är enkel att lokalisera på huvudmenyn och genom ett simpelt tryck på "Enter" påbörjas Supersvep "Playback". Du kan pausa, oavsett vart i cykeln du befinner dig, genom att trycka på "Enter", ytterligare ett entertryck återupptar cykeln.

Konvergenssvep körs ½ tiden av en Supersvepsektion.

Läge: Konvergenssvepsknappar

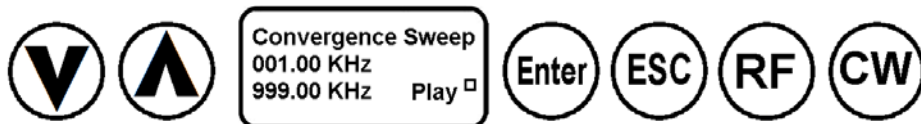

► Enter: Play: När "Play" syns på skärmen är apparatsprodueringen på och (ON)-ljuset är tänd. Nära på alla andra knappar är låsta i playläge, dock är det möjligt att ansluta spännbanden i playläge och påbörja din behandling. Frekvensen visad på displayen är den frekvens som spännbanden mottager.

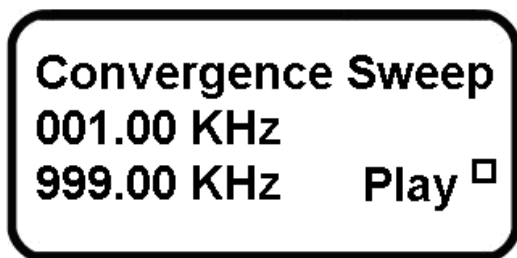

- Pause: Tryck på enter igen för att pausa program. Detta upplåser även alla tillgängliga knappar.
- ESC: Tryck på ESCknappen från "Pause" för att komma till föregående meny.
- Högfrequens elektromagnetiska våg- och radiofrekvens-lägena är ändringsbara i playläge (Byte under drift) Se sida 34-35 för information om högfrequens elektromagnetisk våg och radiofrekvens.

25 grupper: val under meny

- ▶ Använd sänk/höj för att bestämma meny



- ▶ Maskinmenyn startar på grupp #1



- ▶ Tillgängliga förinställda grupper är #1 - #20. Varje grupper innehåller 10 frekvenser
- ▶ Grupp #21 - #25 är lediga. Ett bra ställe att lägga till dina egna frekvensval
- ▶ Det är möjligt att ta bort alla (#1 - #25 grupper) om du behöver fler än de 5 egna användarprogrambara grupperna.

Gruppval och kommandon

- ▶ När du har valt din grupp, #1 - #25, med ▲ upp och ▼ ned-knapparna, tryck "Enter"



Gruppkommandon möjliga nu är:

- ▶ **Kör:** Kör en enda frekvens på position #0 på den nuvarande gruppen. Mer information on "Kör", se sida 20-22
- ▶ **EJECUCIÓN DEL PULSO:** Kör en enda frekvens på position #0 på den nuvarande valda gruppen. Pulserar på och av. Mer information på EJECUCIÓN DEL PULSO, se sida 23
- ▶ **Svep:** Kör alla 10 frekvenser, #0 - #9, på nuvarande vald grupp i en period av 10 minuter per frekvens

Mer information om Svep, se sida 24 - 26

► **Pulserande svep:** Kör alla 10 frekvenser, #0 - #9, på nuvarande vald grupp i en period av 10 minuter per frekvens. Varje sekund är frekvensen pulserande på och av.

Ytterligare information om Pulssvep, se sida 27


► **Program:** omprogrammera den nuvarande gruppen.

Mer information om program, se sida 28-31

Läge: Kör

Körfunktionen är för den speciella uppspelningen av en enda frekvens på apparaten. Körkommandot kommer återspela en användarvald frekvens från listan av de 10 frekvenserna i gruppen.

Då den professionella V2 modellen innehåller 25 grupper, har användaren möjlighet att omedelbart köra vilken frekvens som helst från vilken grupp som helst.

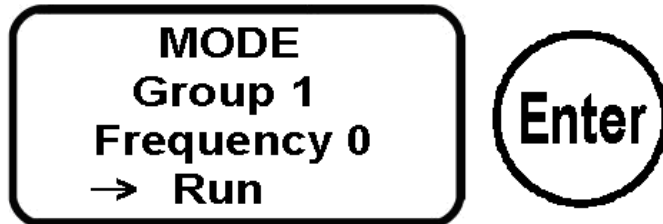

Använd ▲ upp- och ▼ ned-knapparna för att välja frekvens från vilken grupp som helst.

Alla 35000 frekvenser i apparatens ETDFLlista kan bli inprogrammerade i apparaten kvickt, så användaren kan köra de inspelade frekvensvalet i önskad period.

Körkommandot är ett rent manuellt läge och har ingen tid definerad. Så att en användare kan välja körkommandot för att återspela en frekvens i valbar tid; från timmar till dagar.


När du väl tryckt "Enter", visas gruppen du valt, samt frekvenspositionen för gruppen. Även nummert i KHZ och "Play" visar output. Om du trycker "Enter" igen kommer programmet att pausas.

Group 1
Frequency 0
→ Run
001.01 KHz Play □

Notering:

Vår rekommendation är att man använder Svepläget, se sida 24-26, hellre än "Kör", då det är fördelaktigt att använda multipla frekvenser i det automatiska Svepläget eller pulserande svepläget, för effektiv sjukdomsbehandling.

Läge: Kör (PLAY) / tillgängliga knappar

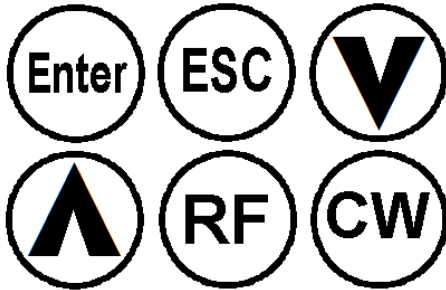

► Play: När Play visas på displayen är apparaten på och (ON)ljuset är skinanade. Nästan alla andra knappar är låsta i playläge, du kan trots det koppla spännbanden och börja din behandling i Playläget. Frekvensen påvisad i displayen visar vilken output spännbanden mottager.

► Pause: Tryck Enter igen för att pausa program. Detta låser upp alla tillgängliga knapptryck.

► sänk/höj för att välja en annan frekvens i pausat läge

► ESC: Gå tillbaka. Kommer bara fungera i pausat läge.

► De högfrekvens elektromagnetiska våg samt radiofrekvens- lägena är ändringsbara i uppspelningsläge. (Byte under drift) Se sida 34 - 35 för information om de högfrekvens elektromagnetiska vågorna samt radiofrekvenerna.

Läge: Pulseringsdriv

Pulseringsdrivfunktionen är identisk med Körläget, förutom att maskinen pulserar en frekvens varje sekund, istället för det normala Körläget som inte pulserar.

Puls använder en unik processor för att lagra och bygga upp energin i en tillfällig avposition, detta, bara för att tillbaka till kroppen kunna pulsera den lagrade energin i en snabb svepanade rörelse. Ha ökad effektivitet av frekvensen och ha en fokuserad vågform, och energin rör sig djupare in i kroppen för mer effektiva helningsbehandlingar.

Dr Beck uppäckte denna metoden genom att konvertera en av hans original Rifeapparater och rörand strömbaneoutput genom en Canonkamas pulserande blixt, fråntagen en gammal kamera. Dr Beck fann den behandlingen betydligt mer effektiv, användade lagrad energipulserad output, än via standardutsatta outputmetoder. Samma pulseringsmetod är använt i din Proapparat, användande modern mikrochip teknologi.

► **Följ Körinstruktionerna för att använda Pulseringsdriv. Pulseringsdriv är identiskt med Körkommandot, förutom pulserandet på och av varje sekund.**

Läge: Svepintroduktion

Svepfunktionen är en tidbestämd återspelningsfunktion som finns på alla original ETDapparater. Svepöget återspelar vilkn som helst av de 25 gruppfrekvenserna var 10:e minut.


Ett frekvensset kommer vara i 100 minuter (1 timme och 40 minuter). Sveplöget kommer också konstant loopa såvida du ej pausar eller ESC:ar (Escape) tillbaka till meny. Detta tillåter användaren att utföra nattliga behandlingsprogram utan pause.

Önskar du en kortare behandlingstid i användandet av sveplöget, manövrera då vidare till meny för programmet "Pulseringsdriv" som alternativ. Pulseringsdriv kommer köra igenom alla förinställda gruppfrekvenser var 20:e till 30:e sekund. Pulseringsdriv är bara körmöjlig på Pro V2 Serier.

Att svepa traditionellt har bevisats vara mest det mest effektiva läget, enbart baserat på intergrationen och användandet i ETDmaskiner i över 6 år. Klientfeedback har konfirmerat att detta original ETDläge (svep) har bevisats vara effektiv för alla typer av tillstånd.

Läge: Svepinstruktioner


Kör 10 Frekvenser i en grupp genom att välja "Svep"

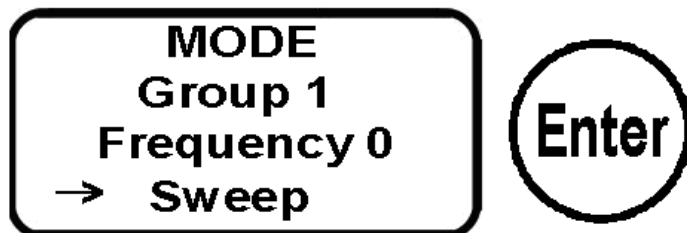

När du valt Enter visas den grupp du valt, likaså frekvenspositionen i den gruppen, och nummert i KHZ. Play visar output. Trycker du då enter igen pausas programmet.

Group 1
Frequency 0
→ **Sweep**
001.01 KHz Play □

Läge: Sveg (Play) / tillgängliga knappar

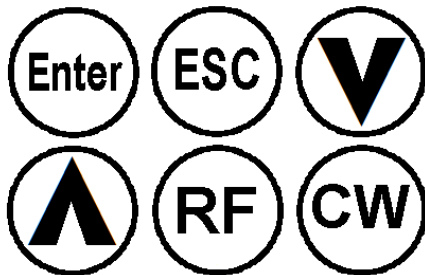

► **Play:** När Play visas på displayen är apparaten på och (ON)-ljuset är skinanade. Nästan alla andra knappar är låsta i playläge, du kan trots det koppla spännbanden och börja din behandling i playläget. Frekvensen påvisad i displayen visar vilken output spännbanden mottager.

► **Pause:** Tryck "Enter" igen för att pausa program. Detta låser upp alla tillgängliga knapptryck.

► **ESC:** Gå tillbaka. Kommer bara fungera i pausat läge.

► **Högfrekvens elektromagnetiska vågor samt radiofrekvens- lägena är ändringsbara i uppspelningsläge. (byte i drift) Se sida 34 - 35 för information om högfrekvens elektromagnetiska vågor samt radiofrekvens.**

Läge: Pulssvepintröduktion

Pulsesvepfunktionen är identisk med svepläget, med undantag att maskinen pulserar gruppens 10 frekvenser varje sekund, istället för den normala svepåterspelnings som är 10 minuter per frekvens, (icke pulserande).

Puls använder en unik prosessor för att lagra och bygga upp energin i en tillfällig avposition, detta, bara för att tillbaka till kroppen kunna pulsera den lagrade energin i en snabb svepanade rörelse. Ha ökad effektivitet av frekvensen och ha en fokuserad vågform, samtidigt som energin rör sig djupare in i kroppen för mer effektiva helningsbehandlingar.

Dr Beck upptäckte denna metoden genom att konvertera en av hans original Rifeapparater och röränd strömbaneoutput genom en Canonkamas pulserande blyxt, frantagen en gammal kamera. Dr Beck fann den behandlingen betydligt mer effektiv, användade lagrad energipulserad output, än via standardutsatta outputmetoder. Samma pulseringsmetod är använt i din Proapparat, användande modern mikrochip teknologi.


► **Följ Svepkommandot för att använda det pulserande Svepläget. Pulssveg är identisk med svepkommandot, förutom pulserandet på och av varje sekund.**

Läge: Program

- ▶ Använd ▼ ▲ pilarna för att förflytta dig från grupp # 1 till grupp # 21 - # 25



- ▶ Grupp # 21 - # 25 är tomma grupper och är inte förinställda. Därför ett bra ställe att börja spara dina program.

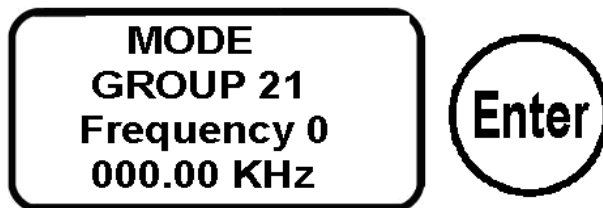


- ▶ Tryck "Enter" på apparaten för att välja grupp # 21, och du kan se att frekvensen har 0 som utgångsläge.
- ▶ Använd ▼ ▲-pilarna för att välja en annan frekvensinställning eller simpelt genom att starta programmeringen på frekvens 0 (enklast)
- ▶ Tryck Enter för att välja förinställd frekvenstid # 0



- ▶ Använd knapparna på keyboardet för att välja din frekvens över nollorna 000.00, och tryck på Enter för att confirmera



- ▶ I exemplet här nedanför ersätter vi 000.00 Khz- frekvensen med 123.45 Khz

MODE
GROUP 21
Frequency 0
123.4  KHz

- ▶ Tryck på Enter för att låsa in (exampel) frekvens 123.45 Khz



MODE
GROUP 21
Frequency 0
123.45 KHz

Frekvens 0 : Är nu blinkandes

- ▶ Nu, tryck ▲- pilen för att flytta till den nästkommande frekvensen: Frekvens 1



Frekvens 1 : Kan nu bli programmerad

Lista på 20 förinställda grupper

Grupp 1 :

Artrit, reumatism och benskörhet

Grupp 2 :

Generell astma & allergi

Grupp 3 :

Generell könsjukdom

Grupp 4 :

Specifik hepatit, Hep A, B, C

Grupp 5 :

Generell tand och oral hälsa

Grupp 6

Generell Cancer

Grupp 7 :

Metastater (organ) cancer

Grupp 8 :

Dr Rife's specialiserade MOR Högfrequens elektromagnetiska vågofrekvenser

Grupp 9 :

Alzheimers samt andra demensdiagnoser

Grupp 10 :

Gram +/- Bakterieinfektioner (förkylning & influensa)

Grupp 11 :

Generella virus

Grupp 12 :

Hypertoni (högt blodtryck)

Grupp 13 :

Hjärtsjukdomar & generell KOL

Grupp 15 :

Dr Hulda Clark, generella parasiter

Grupp 16 :

Cancer: Specifik bröstcancer

Grupp 17 :
Hjärnstörning & hjärnsjukdomar

Grupp 18 :
Leverfläckar (generella) och mänskliga svampsymtom

Grupp 19 :
Generell smärta

Grupp 20:
Stressjukdomar (generella)

Grupp 21 - 25: användarprogrambara grupper.

Funktion: (RF) radiofrekvens:



- ◀ Använd RF i vilket playläge som helst
- ◀ Byt i driv mellan RF och den högfrekvens elektromagnetiska vågen
- ◀ En fyrkant □ syns till höger om "Play" och indikerar att RF är igång.

Den dokumenterade informationen vi har, visar på att Dr. Rifess sanna M.O.R.s som skulle resonera med organismer var de högre RF frekvenserna använda i Kennedymodellerna 110, 281 och Rifestrålning #4 Rifemaskinen och de högre harmoniska frekvenserna använda i Beamstrålningens kliniska Rifemaskiner. Alla av Dr. Rifess maskiner fungerade på RF-frekvenser inte ljudfrekvenser. Från spektrummet analyserat av Philip Hoyland, Beamstrålningens Rifemaskin vet vi att den använde ljudfrekvenser av enbart en anledning; att ge upphov till metoden av sidobandharmonikträffar, för att träffa de högre harmoniska frekvenserna, som var de sanna radiofrekvens M.O.R.s. Henry Siner rapporterade att Philip Hoylands design dödade organismerna under mikroskopsobservation. Addera detta till listan av läkare som använde instrumentet och sade att de hade många sjukdomstillstånd botade. Detta visar på att Philip Hoylands harmoniska metod definitivt fungerar.

Funktion: (CW) den högfrekvens elektromagnetiska vågen:



- ◀ Använd den högfrekvens elektromagnetiska vågen in vilket som av playlägena.
- ◀ Byt i driv, under tiden maskinen är igång mellan den högfrekvens elektromagnetiska vågen och radiofrekvenserna.
- ◀ Ett X syns till höger om "Play", indikerande att den högfrekvens elektromagnetiska vågen är gång.

Den dokumenterade information vi har; visar att de originella kliniska Beamstrålningsinstrumenten fungerade med den högfrekvens elektromagnetiska vågen. ETD:ns professionella modell kan bli omvandlad till en originell Rife beamstrålningsapparat med simulationsläge på 3.3 megahertz harmonisk bärfrekvens, med ljudet RF kombinationen, som tillsammans producerar sidobandsfrekvenser.

Denna sidobandsfrekvens samarbetar med den sanna Rife M.O.R frekvensen och devitaliserar eller gör ofarliga, farliga mikroorganismer.

Den högfrekvens elektromagnetiska vågen var läget använt i den originala Rifemaskinen, av Dr Rife, för att bota hans 16 patienter med "obotliga tillstånd"

Rifes digitalt professionella V2 CPU, uppgradering:

Användande den senaste teknologin inom mikrochips, har ETD labb kopplat originalet, Rife maskinmodell 110 och Rife maskinmodell 281 instrument, för att kunna producera två högfrekvens elektromagnetiska vågor samtidigt.

Denna innovation har också möjliggjort så att man kan reglera låga ljudfrekvenser, med start från 10 Hertz uppåt, till en hög radiofrekvens och högfrekvens elektromagnetiska våg som kom att bli modell 281. Det tog över 6 månader av development för att kombinera de två Rifemaskinerna med ultra precision användande de senaste mikrochipteknologierna, samt unik algoritmsprogrammering.

Den digitalt professionella Rife V2 drivande den högfrekvens elektromagnetiska vågeselektionen, verkar nu som representation av de två kraftfulla Rifemaskinerna, nummerade; 110 respektive 281.

Dessa teknologier har också blivit transfererade till Zapper Digital Professional V2 modell, så att avanceringarna i Rifeteknologier, är vidare bifogande Dr Clark PRO modellen.

Funktion: Fabriksåterställning



◀ Använd Fabriksåterställning för att radera alla frekvenser i alla grupper, och återställ maskinen tillbaka till fabrikskonfigurationen. Vänligen, se sida 32 - 33 för fabriksförinställningar.

▶ Fabriksåterställning återställer bara de 20 förinställda grupperna, tillbaka till fabriksversionerna. (sida 32 - 33), och raderar all kontenta i grupperna 21 - 25 till noll (0.00)

▶ Fabriksåterställningen tar 1 second att utföra

▶ Fabriksåterställningen kommer enbart fungera i initial startup menyfunktion och kommer ej engageras i körläge eller någon av de andra operatörlägena

▶ Ta vara på att inte av misstag råka trycka på fabriksåterställning, då du annars kan komma att behöva återta dina sparade grupp 20 - 25- frekvenser tillbaka till maskinen manuellt, via knappsatsen.

▶ Använd Fabriksåterställning för att återställa maskinen tillbaka till engelska (förinställt språk) samt 17v (förinställd) spänning.

Frågor och svar:

F: Vilken är bäst att använda, den högfrekvens elektromagnetiska vågen eller RF?

S: Den högfrekvens elektromagnetiska vågen (CW) (förinställd) är det bästa läget för det är baserat på Rifestrålningsappartsoriginalet. (RF) var senare ansett efterföljande Kennedy modellerna och skulle anses vara ett andraval.

F: Vart är frekvenserna lokaliserade för att jag skall kunna programmera in mina egna frekvenser i maskinen?

S: ETDFLfrekvenserna hittar du i sista sektionen av denna boken. Frekvenserna är på engelska, då medicinska engelska termer och medicinsk beskrivning är använda i flera olika språk.

Fråga. Kan jag koppla denna apparaten till en extern 12v bil- eller solenergibatteri?

S: PRO V2 seriernas är i behov av 19v för att fungera, om du använder direkt på ett batteri, kommer du behöva en 12v-19v strömväxlare . Husvagnar och campingbussar kan säkert få inpluggat strömadaptern i bilens uttag. Adaptern kan användas i amerikanska uttag (110v) eller andra länders (220v, 230v, 240v)

Kontakta Healthproducts2@gmail.com för externa batterival.
USAbutiken har solbatteri medtagbara apparater som kommer köra PRO V2 serierna över kraftnät.

F. Kan 2 personer använda maskinen?

S: Ja, 2 personer kan använda maskinen. Det är 2 inmatningshål uppe på Proserien som tillåter en att koppla in för två personer.

- Bara en grupp kan spelas samtidig
- Simultanfrekvens produktion är bara möjligt i konvergenssvepningsläge.

Program för upp till 25 personer kan vara lagrade i maskinen, vilket är användbart för en klinik, där de kan vara förberedda på upp till 25 klienter i förtid.

F. Vad är garantin på min professionella ETDmaskin?

S: 12 månader internationell garanti i alla internationella länder. Återsänd post kan komma att kosta i länder utanför UK, USA och Australien.

F: Kan jag köpa bulk för nedsatt pris eller bli en återförsäljare?

S: Ja, nedsatt pris är möjliga vid mängdköp. Kontakta en distributör i ditt område. Kontakter för UK, EU, USA och Japan är på baksidan. (((sista sidan is last page, but you mean back page? Back page is Baksidan.))))

F: Jag gillar inte spännbanden, har ni ett alternativ?

S Ja. Den senaste Rifehelningsmattan är en ensidig konduktiv "sängmatta" som du kan ligga på, utan att vara kopplad till spännband och sladdar. Det är ett utmärk val för ryggsmärta, samt även för vilket annat program som helst. Mattan är tillgänglig från USA- och UK-butiker och kan beställas direkt, här:

(USA)

www.healthproducts2.com (Mattan visas på hemsidan)

(UK)

rifedigital.net/order ("Mattpaketet" är på sidan)

I USA är mattan sänd med USPS (US) Postservice, och även tillgänglig till alla internationella länder. Rifehelningsmatta kan enbart kopplas med "PRO & PRO V2" serierna.

I UK och Eu, är mattpaketet postat med Royal Mail, inkluderande tracking.

F. Efter läst Dr Rifés journal, vet jag att Dr Rife använde spännband på hans 1940modell, Rifemaskiner, hur som helst vet jag också att han använde ett ljus eller lampa som extra val i behandlingar. Kommer ni sälja en Rifelampa för den professionella maskinen?

S: ETDlab i Tyskland jobbar i denna stund på en Rifelampa att passa Rifés professionella digitala model. Detta har varit ett fortlöpande projekt i 2 år, då överförandet av frekvenser till ljus kräver mycket undersökning och tester på specifikt utvalda personer. Vi förmodar en release av Rifelampan i 2020 - 2022, men har i dagsläget inget datum givet.

F. Jag behöver ett par extra spännband och sladdar, då jag arbetar med klienter, så är i behov av extra accessoarer.

Svar:

- kardborrspännband
- Flexibla spännband
- Extra ledningar
- Rife helningsmatta
- medtagbart solbatteripack

finns tillgängliga från USAbutiker, och kan beställas direkt via:
www.healthproducts2.com (spännband finns på hemsidan. Spännband är tillgängliga för internationella klienter)

För UK, Eu och globalt:

- Rife helingsmattor
- är tillgängliga från **rifedigital.net/order** (Eller email rifedigitaluk@gmail.com)

Japan

- Rife helningsmattor, kardborrspännbandband, ledningar
- Kontakta ovan internationell butik

Rekommendationer för behandlingar

Generella rekommendationer:

Om du är en nybörjare när det kommer till denna formen av terapi, eller om du inte använt den professionella V2:n alls, eller bara en kort tid, då rekommenderar vi att du startar behandlingen långsamt. Kör i svepläget maximalt en cykel per dag, om möjligt, i två sessioner (först 5 frekvenser, ett par timmar senare de resterande 5).

Efter ett par dagar med denna något konservativa behandling, kan du öka behandlingstiden till 2 svepcyklar om dagen. Om du regelbundet arbetar med apparaten, kan du starta nattliga behandlingar, 7 - 9 timmar med påkopplade fotspännband. På så sätt kan du fullborda 3 till 4 cyklar medans du sover, och uppleva stor, omedelbar helningsframgång. Generellt sagt, sömnen blir inte lidanade; många användare tillomed beskrev snarare motsatsen, de kände sig klarare och mer alerta efter nätter med elektroterapi behandlingar.

ETDfrekvensboken listar tusentals sjukdomar kombinerat med 10 frekvenser. Ibland är valet enkelt, exempelvis; har du en förkylning, simpelt programmera din apparat med det frekvensset för "vanlig förkylning" och ställ in maskinen på <svep>. Mer komplicerad sjukdom kan behöva ett individualiserat program.

Generella sjukdomsbehandlingar:

Generella behandlingar skulle klassas som parasitrensning, förkylnings- eller influensabehandlingar, svamp- eller hudsjukdomar, bakterier, virusinfektioner och avtoxinerings, för att nämna ett par stycken. Dessa tillstånd kan bli behandlade i en period mellan 21 – 30 dagar.

För generella parasitbehandlingar rekommenderar vi:
Den parasitgenerella omfattande: Dr Clark (förinställt # 15)

Programmera ETD:n med varje frekvens och använd 10 minuter per frekvens. Många människor använder ETD:n på foten under natten, och de första 21 dagarna av rengöringen 7-9 timmar per dag eller natt, medan sömn eller vila. Placera vristspännbanden på båda fötterna med silvesidan nuddande sulorna. Programmera alla de ovan frekvenserna och tillåt frekvenserna över natten att cykla i en loop var 100:de minut.

Om du inte är medveten om förhållandet som behandlas, enkelt använd då en av de apparförinställda frekvenserna i maskinen. Och använd <Svep> knappen att köra frekvenserna enligt instruktionerna ovan.

Seriösa sjukdomsbehandlingar:

Mer seriösa sjukdomar kräver oftast en längre period av behandling, och tillåter ofta en frekvenskurs som kan komma att förändras var varranan vecka. Vår apparat har framgångsrikt blivit använd att behandla seriösa sjukdomstillstånd för tusentals människor. Gång på gång har resultaten visat hur de förlängda behandlingssessionerna har producerat den bästa helningsresponsen. Förlängda behandlingssessioner är lämpligare under natten, så att dagssysslor eller arbetet slipper att bli lidande. En nattlig session med spännbanden på fötterna kommer tillåta en djupare helning som når och penetrerar kroppens organ. Exempelvis, tarmarna är organ som tidigare inte kunnat bli nått av tidigare frekvensapparater; nu med ETD:n kan en eliminera parasiter och patogener som inkräktar på tarmarna, och andra organ såsom levern, njurar, gallblåsan och magen. Oavsett, det tar tid och du är förväntad att använda frekvenserna som resonerar specifikt med patogenerna eller parasiterna involverade. Vi rekommenderar <svcp>läget för detta fall, då läget scrollar igenom de 10 frekvenserna var 10:de minut, i en loopande cykel. Varje frekvens resonerar för att behandla det specifika sjukdomstillståndet.

Imed att ETD:n fungerar genom naturliga frekvenser, kan tre månader pausas för en regression av seriösare sjukdomstillstånd. Naturliga mediciner fungera på detta sätt på en mer subtil nivå, och under en förlängd tidperiod. Igen, bästa resultat nås med de förlängda nattliga behandlingssessionerna.

Hur man väljer frekvenserna

Om du har symptom som inte så lätt kan identifieras, då finns det flera metoder att välja ditt behandlingsprogram på:

- För att välja den korrekta frekvensen eller frekvenssettet, kan du arbeta med kinesiologi (muskeltestning, baserad på principen att kroppen redan vet vad den behöver; du kan arbeta med en kinesiologipraktiserande eller lära denna teknologi för ditt egna hemmabruk). Vissa klienter jobbar med pendel, som också är enkelt att lära sig.

- Det finns elektroterapiapparater som kan skriva väldigt precisa diagnosiska profiler. De är ofta använda av homeopater (Vegamaskin) eller i naturliga praktiker (Bioresonanceapparater), som Kvantum SCIO. Dessa är baserade på samma princip, bara de startar från en fullkommligt frisk kropp och är sedan mätt och diagnostiserar dissonansen som finns i en ohälsosam kropp. Så du kan kolla en sådan klinik, få en diagnosprofil och sedan bota dig själv med din apparat.
- De flesta sjukdomsfrekvenserna är listade i boken. Trots det kan medicinska definitioner förändras med tiden eller bli omdefinierade. Om du inte kan hitta en frekvens kan du möjligen kollat i fel sektion av boken. Exempelvis: Hudcancer kan listas som "**Cancer, hud**". Eller bandmask kan vara listad som "**Parasiter, bandmask**" exempelvis. Om du är osäker, emaila då din maskinsleverantör för det korrekta frekvenssettet eller ladda ner PDF versionen av denna bok, och använd Adobe PDF:ns sökkommando för att hitta sjukdomsnamnet.
- Om du använder din ETD regelbundet och du märker av andra allvarliga sideffekter: du kommer lära känna din kropp mycket bättre och bli känsligare mot den fysiska processen av denna terapin. Du kommer kunna fastställa din sjukdom och därför välja din egen behandling mer preciserat. Du kommer bli kapabel att identifiera frekvenserna som tar dig till större hälsa och kunna ta in nya set av frekvenser vid behov.

Varningsnotering på behandlingarna

Du kan inte göra "något fel" med dessa behandlingarna. Exempelvis kan du använda maskinen för att eliminera en specifik parasit, och om du inte har denna parasiten kommer den elektriska frekvensen simpelt försvinna utan effekt på kroppen. Undersökningar har visat att patogener lever i ett specifikt frekvensläge. Om du korsar frekvenslägen med andra patogener eller parasiter av snarlik ressonans är det troligt att du kan eliminera den arten. Vi rekommenderar föränderligt frekvensset om du ej känner av förändring med dina sjukdomssymtom efter förlängd behandling (5 dagar). ETDfrekvensboken kommer förse andra frekvensalternativ att assistera vid ytterligare behandling.

Vad är en Herxheimerreaktion?

När du påbörjar elektroterapibehandlingar dödas många parasiter och patogener. Detta kan överväldiga ditt immunsystem och leda till illamående, trötthet and yrsel. Detta kallas 'Herxheimereffekt', eller 'parasit-utdödnings-syndrom', en immunsystemsrespons på toxiner i blodet och vävnaderna.. Denna kortfattade överladdning av levern och andra eliminerande organ försämrar till en början dina symtom. Detta kan vara upp till timmar men också 2-3 dagar innan du börjar må mycket bättre. Det är viktigt att veta att försämringen av symptomen inte visar på ett misslyckande i behandlingen; faktum är, att det är tvärt emot, exakta motsatsen. Det är beviset för en mycket stark och effektiv avgitning.

Vad ska man göra när en Herxheimerreaktion inträffar?

Den viktigaste saken är att acceptera denna fysiska reaktion, som ett konfirmerande resultat av behandlingen. Om det är väldigt allvarligt, reducera då tiden av behandling, drick mycket vatten (minst 4 liter per dag) och vila (ingen träning!) Ät lätta måltider så matsmältningssystemet inte behöver överarbeta. Tillför färskpressad citronjuice i dricksvattnet och säkerställ att ditt matsmältningssystem fungerar korrekt (Epsomsalt eller naturliga laxeringsmedel kan vara rekommenderat att använda). Ta en paus från elektroterapi sessionen ett par dagar tills du är återställd.

ETDvarningar

- Det har föreslagits att gravida kvinnor inte bör använda elektrofrekvensapparater
- Pacemakers: Du kan använda med Pacemaker, men använd maskinspännbanden och sladdar mer än 12 inches från bröstområdet.
- Det har förslagits att den frekvensoutput genererad i bandbredden av Lactobacillus Acidophilus: (346.05, 347.00, 348.00, 349.00, 350.00, 351.65, 352.00, 353.00, 354.00, 355.00) kan trigga svampinfektion Candidiasis (Candida) hos vissa människor. Om ditt behandlingsprogram delar spelrum med bandbredden av denna naturliga mag- och tarmflora, ta då dagligen "Pro Biotic" supplement, tillgängliga på hälsokostbutiker. Lactobacillus acidophilus finns också i naturell yoghurt, Kefir och Kombucha.

Viktig notering:

I sällsynta fall kan man känna en kittlande sensation på huden, på grund av användandet av vår ETD. Vanligtvis händer detta när man använt vristspännband på känslig hud; såsom på abdomen, vristerna, eller annan mjuk hudarea. För att undvika detta, vänligen använd vristspännbanden enbart på handflatorna eller fotsulorna.

Användande av spännband en längre tid på känslig hudarea trots vad ovan nämt gällande stickande sensation, kan orsaka lokalt hudutslag. Om du verkligen behöver behandla just på dessa ställena, vänligen omplacera spännbanden regelbundet var varannan minut, vid känslan av stickande känsla. Bästa stället att utföra behandling under en längre tidperiod är handflatorna och/eller fotsulorna.

Du kan också tänkas ändra spänningen neråt på den Professionella V2:n, från 17v till 14.5v eller 12.5v för att reducera känslighetsproblem. Spänningen är förinställd på 17v. Detta är förinställningen för Rife Digital och bör inte bli ändrad på grund av att denna spänningsnivå på 17v tillför den effektivaste sjukdomsbehandlingsnivån.

Reducera spänning enbart för:

- ▶ Behandling av små barn
- ▶ Superkänslighet inför frekvenssignalen
- ▶ Känslighet som orsakar rodnad eller hudutslag
- ▶ Användandet av en Rifehealingmatta i direktkontakt med huden.



Bästa stället för långa stunder av behandling, såsom nattetid, är under fotsulorna. På så sätt vidrör knappen av rostfritt stål undersidorna av fötterna. Fotsulorna har väldigt tjock hud och tolererar långa perioder av elektroterapi.

(Bild) exempel på hur spännbanden är säkrade på fötterna, mest effektivt



Förslag för pålitliga maskinoperationer.

Vi skulle vilja ge förslaget; att maskinen är placerad på ett hårt underlag, exempelvis på ett glasbord, nattduksbord i trä, eller direkt på golvet om du har marmor eller liknande yta.

Placera inte maskinen uppe på sängen, i sängen, på en heltäckningsmatta eller på kudde/kläder.

Bli inte orolig om det gröna ljuset börjar blinka på programmen: 00.01 – 00.04 kHz

I användandet av "Superlåg Range"- frekvenserna i 00.01 – 00.04, kan de gröna ljuset komma att blinka, indikerande på att maskinen är i ett utgångsläge av låg frekvens. Det väldigt låga frekvenslägena 00.01 – 00.04 är de mest avgiftningseffektiva utrymmena.


Och av denna anledningen var det passande med ett grönt blinkande ljus, så läkare och övrig hälsoprofessionella kunde monitorera deras klienter.

De låga avgiftningserien kan orsaka en lätt Herxheimerreaktion för vissa klienter. Denna avgiftningsserie tillåter snabb elimination av patogener och bakterier i kroppen som kan orsaka en lätt reaktion hos somliga personer, så som kortfattade förkylningssymtom, som sällan stannar mer än ett par timmar.

Denna maskin har blivit kvalitetskontrollspasserad i flera år av fortsatt framgångsrik verksamhet.

Teknisk data

Vågform=

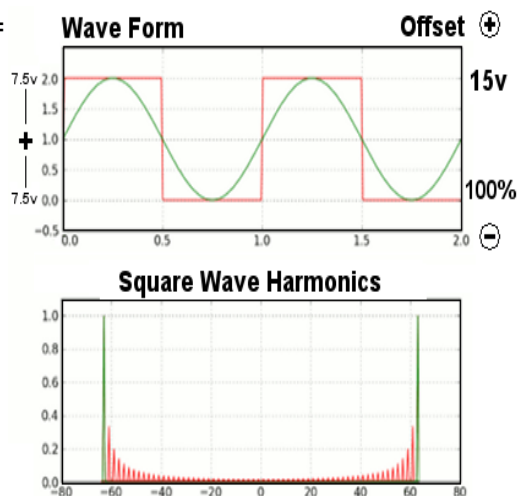

- Fyrkantig vågoutput
- Spänning 17v (Osklioskopi)
- Spänning
- 8.5v (Multimeter)
- Cykel 100% positiv offset
- DAC: Digital precision
- RF Frekvenser användande
- Högfrekvens elektromagnetisk vågImpedans
- * Automatisk byte till SINEvåg enbart när Dr Rife Beamstrålningslampapparat körs

Laboriorietestad harmonikvågform
periodisk på 100% frekvenser

Fig. 2

Squarewave h... = fyrkantig vågharmonik

DAC

Digitala frekvenser från direkt digitalsyntes och digital signalbehandling är konverterade till analog innan de är utsända från ETD:n. Dessa digital-till-analogkonverterare är också igenkända som "DAC". ETDsignalen genomgår DAC:en, passerar lågpass- eller bandpassfilter för att slutföra analogversionen. Frekvensen producerad är en mycket exakt analogfrekvens med alla över- och undertoner av den analogfrekvensen..

Analogfrekvensen producerad av ett digitalt chip kan bli svept upp eller ned, med mer exakthet än de flesta frekvensgeneratorerna. De viktigaste att lägga på minnet är att frekvensen kommer bli konverterad till analog innan den är utsignerad av ETD:n. Digitalt producerade frekvenser, när konverterade till analog, är de mest exakta. Dessa analoga frekvenser, väl konverterade till fyrkantig våg, producerar den fyrkantiga vågharmoniken (som visad i fig. 2) Radiofrekvenser är producerade användande högfrekvens elektromagnetisk vågimpedans.

Vågtyp

Vågtypen är fyrkantig våg, den mest pålitliga vågformen testad för eliminering av patogener och sjukdomsbehandling. Tidsproportionen är fixerad 50% på standardmodellen, och 10% - 90% fyrkantig våg tidsproportion på den professionella V2 modellen, under pulslägesvalet. (Fig. 1) Vågens form kommer förvandlas till en Sinevåg när Beamstrålning används med den professionella V2:n, i enlighet med Dr Rifés Beamstrålningsmaskins specifikationer.

Spänning och amperage

Spänningsoutput mätt av oscilloskop kommer korrekt att mäta peaken av måttet "Fyrkantig våg" (8.5v) adderad till botten av den fyrkantiga vågen (8.5v) att producera den korrekta outputläsningen av 17v.

Output mätt genom en multimeter kommer precis att mäta toppen av den fyrkantiga vågen (8.5v) enbart. Inläsningen är omedelbar och kommer ej account för den totalt sanna mätningen ($8.5 + 8.5 = 17v$).

Så vänligen notera, om du mäter the output på din ETD med en multimeter, förstå att måttet visat kommer bara spegla 50% av den totala output av din ETDapparat. Denna avvikelse har att göra med många multimeters oförmåga att riktigt kunna mäta spänning från en vågform. Om i tvivelsmål, testa alltid ETDoutputten med ett professionellt oscilloskop. Amperageoutput från DC källa är 4500ma.

Harmonika frekvenser

Frekvenser producerar harmonik som progresserar från hög till låg, och igen till hög med vågens outputsekvenser (fig. 2). Harmonikfrekvenserna består av övertoner och undertoner av frekvensen. I en apparat som ETDfrekvensgeneratorn, fortlöper harmonikerna ständigt utan uppehåll. Med harmonik kommer du inte enbart erhålla helande effekter av frekvensen själv, utan du kommer också göra det svårt för patogenerna att undgå den givna frekvensen.

Introduction till ETDfrekvenslistan

Den reviderade editionen av ETDfrekvenslistan (Elektroterapiapparatslistan, utgåva; aug 2020 - 2022) tillförser användaren av ETD en tydlig och omfattande manual att använda elektronisk terapiapparat mot diverse olika sjukdomar och krämpor.

Denna bok har blivit anpassad efter originalversionen CAFLfrekvenslistan, för användningen av din apparat och all programbar frekvens nämnd i kilohertz (kHz).

Elektrobehandlings apparatlista (© ETDFL-associationen)

Denna bok har blivit sammanställd av medicinska undersökare, som använt Dr Rifés professionella V2maskin i kombination med kvantum SCIO Bioresonansapparat, för att upptäcka de specifika frekvenserna som reflekterar framgångsrik medicinsk behandling av patienter på olika RIFEfrekvensinställningar. De medicinskt praktiserande har gjort noteringar av det utrymme av frekvenser en specifik sjukdom haft när behandlingen varit lyckad. Dessa har sedan blivit införda i denna boken.

Frekvenserna i denna bok reflekterar framgångsrika behandlingar användande digitala elektroterapiapparater. Möjligtvis kommer de inte alltid vara ett bot för en sjukdom, men frekvenserna kommer att assistera som stöd i många sjukdomar. Många parasitspecifika sjukdomar kan bli behandlade och läkta genom de specifika frekvensprogrammen utmärkta i ETDfrekvenslistan.

Alla frekvenser i denna bok är i kilohertz (KHz). 1 KHz korresponderar med 1000 Hz (i.e. 30000 Hz = 30.00 KHz). Räckvidden för den digitala apparaten är från 000.01 KHz upp till 999.99 KHz (exakt. 1 MHz (megahertz)). Denna frekvenssamling har tagit form som tillåter dig programmera frekvenssetten direkt in i din digitala frekvensapparat.

Välj de frekvensset från denna bok genom navigatorkontrollbordet, direkt in i maskinen, för att uppnå en förbättring med dina symptom, botmedlet för diverse olika sjukdomstillstånd och fysiska krämpor.

ETDFL

E.T.D.F.L är ett fortlöpande projekt där 12 kliniker tvärs över planeten använder Kvantum SCIO Bioresonerande maskiner för att registrera sjukdomsfrekvenser av faktiska klienter, och därefter producera de 10 mest korrekta frekvenserna, som är klassade lämpliga för behandlingar med den Rojala Rifemaskinen. Detta projekt började 2006 då originalet "CAFL frekvenslistan" upphörde. ETDFL blev den nya listan, nu använd av mer än 100,000 Rojala Rifemaskinsanvändare tvärs över planeten.

Precisionen av frekvenserna är sedda i de positiva resultaten de klienterna som använt denna frekvenslist på kliniker och i hem i varje land.

ETDFL är uppdaterad en gång per år. Senaste PDFversionen tillgänglig på: ETDFL.com

PDFversionerna av ETDFL på **ETDFL.com** tillåter dig att söka igenom ETDFLdatabasen för sjukdomsfrekvenser som kan vara mer uppdaterade än listan i denna bok.

Denna Digitalt professional V2 apparaten är licensierad att använda alla Royal Rife frekvensset © 2020 - 2022 ETDFL Berlin, Germany

Ansvarsfriskrivning

E.T.D.F.L-associationen (ETDFL.com) erhåller inga garantier på att de rojala Rifefrekvenserna i denna bok kommer bota någon specifik sjukdom. Listningen är en guide sammanställd av elektroterapimediscinsk personal, som haft framgångsrika resultat på varje specifikt listade frekvens.

Accessories Available at: ETDFL.COM

► **Dr Rife Treatment Straps for Hands and Feet**

- Flex Straps:
- Velcro Straps:
- Wires (Button Cables):



► **Dr Rife Treatment Mats**

- 3M Conductive Rubber Mats (Rife Mat)



► **3M Conductive Rubber Belts (Rife Belt)**



- **Beamer.Tech Pulsed Electromagnetic Field Technology**
Beamer.Tech PEMF Full Body Treatment Mat (www.beamer.tech)



SMD Light Technology: Available at: ETDFL.COM

- ▶**Dr Rife Retyne™ Macular Degeneration Light Healing Mat**
- For the treatment of over 25 Eye Diseases and Disorders.



- ▶**Dr Rife Red LED Infrared Injury Healing MAT**
- For the treatment of every type of Sprain and Injury.



- ▶**Dr Rife Culique™ Anti Aging Multiple IR Healing Mat**
- For Anti-Ageing treatment, Skin Treatment and Hair Loss Treatment



- ▶**Dr Rife Beam Ray™ Cancer Treatment Sinewave Modulated Digital Waveform Light Mat**



Internationell försäljning och undersökningar

USA / Kanada / Australien / globalt

Försäljning och service

(web) www.rifedigital.com

(E) healthproducts2@gmail.com

USA ☎ 206-708-6408

Internationellt ☎ 0011-1-206-708-6408

UK & Europeiska unionen,

Östra Europa & globalt

London UK-butik, manager: Rosalie

(web) www.rifedigital.net (E): rifedigitaluk@gmail.com

(web) www.drclark.co/uk (E): clarkzappersuk@gmail.com

UK ☎ 07376056374

Internationellt ☎ 0044 7376056374

Japan: この店舗の日本人顧客のみを対象とした大規模割引

ウェブサイト rifedigital.jp

マネージャー ピーター・ウィリアムズ博士

E メール rifedigital@gmail.com



© 2020-2022, elektroterapiapparater, Berlin Tyskland

© 2020-2022, ETDFL, Berlin Tyskland